


Vue du dessous du module

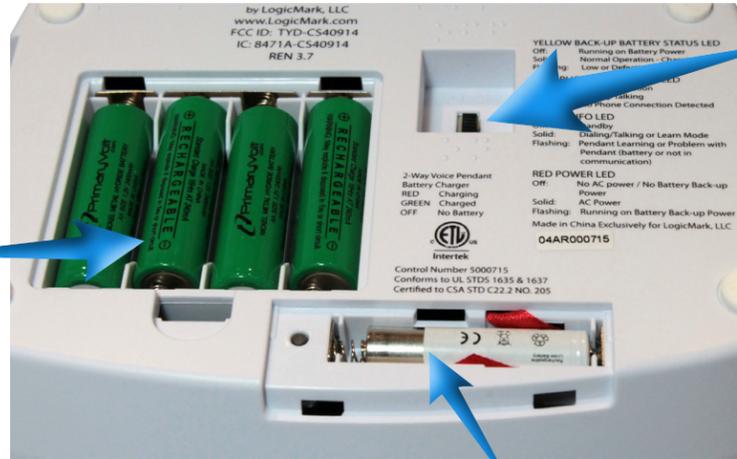

Piles de secours
* Notez l'orientation des piles

Interrupteur principal ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)

Port de chargement de la pile pour pendentif de communication vocale bidirectionnelle (pour l'accessoire en option)
* Notez l'orientation de la pile

Longe amovible



Pendentif sur la dragonne

Bouton d'urgence gris Appuyez pendant deux secondes



Pendentif sur la longe



Pendentif
Pièce no 40915

DEL d'état rouge

Module CaretakerSentry - Modèle 40914
ID de la FCC : TYD-CS40914
IC : 8471A-CS40914
Pendentif de base CaretakerSentry - Modèle 40915
ID de la FCC : TYD-CS40915
IC : 8471A-CS40915
REN 3.7

Avis de non-responsabilité et garantie limitée de LogicMark

LIMITES DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION : L'acheteur reconnaît que les signaux qui sont transmis par le biais de lignes téléphoniques ou autres modes de communication, passent par des réseaux de communication qui ne relèvent pas du contrôle de LogicMark, S.A.R.L. et qui ne sont pas entretenus par LogicMark, S.A.R.L. et, par conséquent LogicMark, S.A.R.L. ne sera pas tenue responsable de la déféctuosité de tout matériel ou de la communication qui ferait que les signaux de transmission ne parviennent pas à votre liste de contacts, y compris les téléphonistes du service d'urgence 9-1-1 ou des dommages qui pourraient en résulter. L'acheteur reconnaît que LogicMark, S.A.R.L. ne fournit aucune intervention liée au matériel du système. Le matériel est conçu pour communiquer avec une centrale téléphonique de votre choix et LogicMark, S.A.R.L. n'est pas et ne sera pas tenue responsable du temps d'intervention de l'ambulance, des services de police ou d'autres services d'intervention d'urgence ou de toute intervention de la centrale de surveillance.

ESSAI ET ENTRETIEN DE CE MATÉRIEL : Le matériel, une fois installé, appartient exclusivement à l'acheteur et est sous le contrôle de ce dernier, et il est de sa seule responsabilité de vérifier le fonctionnement du matériel et de faire une demande de service si le matériel est couvert par la garantie.

RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR : Le recours exclusif de l'acheteur en cas de défaut de LogicMark, S.A.R.L. susmentionné est de demander à LogicMark, S.A.R.L. qu'elle répare ou remplace, selon l'option de LogicMark, S.A.R.L., tout matériel ou pièce du système d'alarme d'urgence personnel qui n'est pas fonctionnel durant la période de garantie de LogicMark, S.A.R.L.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : Ni l'équipement ni la garantie n'ont été élaborés dans le but de prévenir les pertes ou les blessures. La garantie limitée et l'avis de non-responsabilité constituent les conditions de vente et d'utilisation du matériel et si, nonobstant les conditions de vente et d'utilisation du produit, il en découlerait une responsabilité de la part de LogicMark, S.A.R.L. de quelque nature que ce soit, indépendamment du fait que la perte, le dommage ou la blessure ait été causé par la négligence de LogicMark, S.A.R.L. ou qu'elle y ait contribué ou par son inexécution de remplir toute obligation ou responsabilité stricte envers les produits, une telle responsabilité sera limitée au montant payé par l'acheteur à LogicMark, S.A.R.L. pour le produit ou à la somme de 350 dollars, selon celui qui est le plus élevé.

Consultez le détaillant pour obtenir des renseignements au sujet de la garantie.

© LogicMark, S.A.R.L. Part # 4106-FR-BASIC v6.1

CARETAKERSENTRY

Guide d'installation rapide

Instructions pour installer votre nouveau système de secours d'urgence personnel

Vue du dessus du module Pièce no 40914

Haut-parleur




Annuler (1 seconde)
Vérification du système (8 secondes)

Bouton bleu du module CareTaker

Bouton d'urgence rouge

Microphone

Vue arrière du module

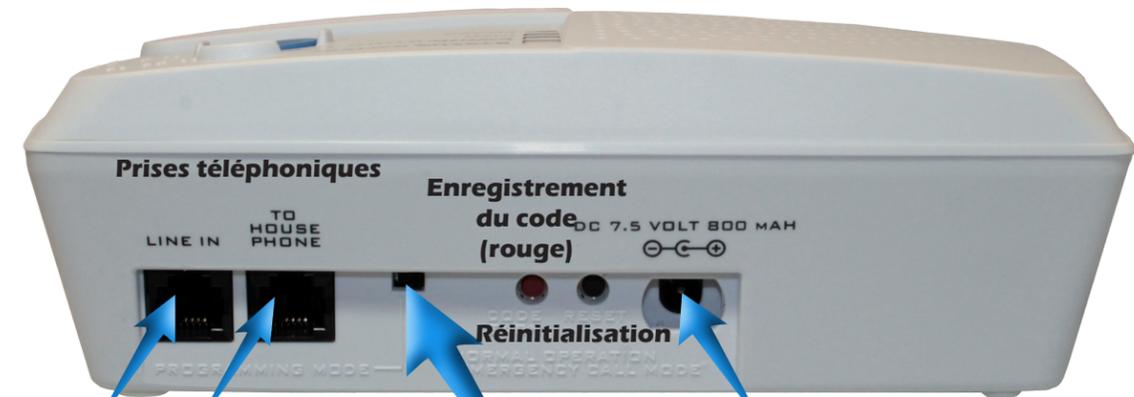

ENTRÉE de ligne

Vers le téléphone du domicile

Alimentation CC 7,5 V 800 mAh

Interrupteur de programmation

Mode de programmation

Fonctionnement régulier du « Mode appel d'urgence »

Vue latérale du module



Prise pour accessoire cellulaire

1 Assurez-vous que tous les accessoires se trouvent dans la trousse



2 Mettez les piles dans le module



Placez les piles rechargeables vertes dans le compartiment qui se trouve sous le module. **Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) est à la position MARCHE.** Vous entendrez le message « Running on Battery Power » (Fonctionnement sur la pile). Le module fonctionnera de cette manière jusqu'à ce que le bloc d'alimentation de l'adaptateur CA soit branché.

Modèle no 40911



3 Branchez la ligne téléphonique et le cordon d'alimentation dans les prises murales



4 Faites l'essai du module

Faire l'essai du système

- APPUYEZ et MAINTENEZ ENFONCÉ le bouton CANCEL (ANNULER) pendant **huit à dix secondes** pour entrer dans le mode « **Vérification du système** ».
- Appuyez sur le bouton EMERGENCY (D'URGENCE) GRIS du pendentif pendant **deux secondes** (la DEL ROUGE du pendentif devrait **s'ALLUMER** pendant une seconde).
- Écoutez le message vocal provenant du module :
 - Vous entendrez « All Systems are OK – Battery is OK » (Tous les systèmes fonctionnent - La pile fonctionne) si le système est bien installé.
 - Si vous entendez un autre message vocal, le module décrira le problème.
- Appuyez et relâchez le bouton CANCEL (ANNULER) pendant une seconde pour quitter le mode de vérification (le module quittera le mode automatiquement après trois minutes).
- Nous vous recommandons d'effectuer cet essai toutes les semaines.**

Appeler le téléphoniste du service d'urgence :

- Appuyez sur le bouton EMERGENCY (D'URGENCE) GRIS du pendentif pendant deux secondes (la DEL ROUGE du pendentif devrait s'ALLUMER pendant une seconde).
- Vous devriez entendre une tonalité, une composition et la communication entre le système CaretakerSentry et la centrale téléphonique. Le téléphoniste devrait répondre à l'appel quelques secondes plus tard.
- Parlez normalement au module, comme sur un téléphone à haut-parleur.
- À la fin de la conversation, le système CaretakerAlert devrait automatiquement raccrocher; si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton CANCEL (ANNULER) pendant une seconde.

