

Spanish

GUARDIAN ALERT 911

con DECT 6.0™



Disfrute la independencia de una vida libre

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Modelo N° 30911



Nota: Se deberán colocar las baterías antes de comenzar a utilizar el equipo.

Le agradecemos haber elegido el Guardian Alert 911 – su conexión personal con el operador del servicio de emergencias 911 cuando usted lo necesite.

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL Y GUÁRDELO PARA UTILIZARLO COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

Contenidos:

Los elementos que aparecen a continuación están incluidos con su Guardian Alert 911. Usted podrá solicitar repuestos o partes a LogicMark, LLC, o llamando al departamento de Atención al cliente al teléfono 800-519-2419



Colgante



Unidad base



Adaptador de CA



Gancho para cinturón



Cordón para el cuello



Cable para teléfono



Destornillador



Bifurcador de línea telefónica



Lithium Ion 3.7 v

Accesorios opcionales:



**Reserva de batería
Pieza n.º 30912**



**Lockbox (caja de seguridad)
Pieza n.º 30913**

ÍNDICE

Generalidades del Guardian Alert 911	3
Instalación de la batería	4
Localización de la unidad base	4
Sistema para usar como colgante	5
Características de la unidad base	5
Conexión del Guardian Alert 911	
Conexión estándar.....	5
Conexión a un segundo teléfono.....	6
En caso que su hogar cuente con sistema VoIP or DSL.....	6
Operación del Guardian Alert 911	
Sobre el colgante.....	6
Conexión de la elemento de amarre para el cuello	7
Resistencia al agua.....	7
Control de la batería.....	7
Control del sistema	8
Marcador de emergencia utilizando el botón de pánico	8
Como cortar la comunicación	9
Guía de solución de inconvenientes	10

Generalidades del Guardian Alert 911:

El Guardian Alert 911 es un pequeño teléfono inalámbrico de manos libres, lo suficientemente pequeño para poder usarlo alrededor del cuello. Es más pequeño que la mayoría de los teléfonos celulares.

Oprimiendo un solo botón, el Guardian Alert 911 marca automáticamente el número universal de emergencias 911. Podrá hablar directamente con el operador del 911 sobre su emergencia.

Tiene suficiente alcance para cubrir la mayoría de los hogares, incluso desde el jardín. NO es un teléfono celular, por lo que no funcionará lejos de su hogar. Está especialmente diseñado para utilizarse dentro del hogar. Podrá utilizar el Control del sistema (System Check - consulte la página 10) para confirmar que el COLGANTE (PENDANT) está dentro del alcance de la UNIDAD BASE (BASE UNIT).

El COLGANTE del Guardian Alert 911 cuenta con su propia pila reemplazable. Se deberá colocar la pila antes de comenzar a utilizar el equipo. Esta tendrá una vida útil de entre 6 a 12 meses en modo standby. Debido a que el COLGANTE nunca necesita recarga, lo puede llevar consigo en todo momento. Recomendamos que la pila del COLGANTE sea reemplazada cada seis meses.

Al igual que la mayoría de los teléfonos inalámbricos, el Guardian Alert 911 debe estar enchufado a un tomacorrientes utilizando su adaptador de CA (incluido) para poder funcionar. Está disponible un sistema de batería de respaldo para mantener la UNIDAD BASE del Guardian Alert 911 funcionando por hasta 24 horas en caso de corte del suministro eléctrico. Se lo puede solicitar al número de Atención al cliente que aparece en la contratapa de este manual. Solicite la pieza número 30912.

Instalación de la batería:

Es importante saber que el COLGANTE necesita una pila AAA. Recomendamos utilizar una pila nueva, de buena calidad, de tipo alcalina o de litio de marca reconocida. Bajo condiciones normales de uso, la unidad en modo standby se mantendrá lista para ser utilizada por al menos seis meses. Al ser activada durante una emergencia, podrá hablar hasta 30 minutos. Consulte el diagrama que aparece a la derecha para instalar la pila que está incluida en su paquete.

Para asegurarse que su Guardian Alert 911 pueda ser utilizado cuando lo necesite, cambie la pila cada 6 meses.



“+” Terminal

NOTA: La tapa de la pila sólo puede ser colocada en una dirección.

Nota: Esto no es una batería AAA disponible. Se debe asegurar años de operación, pero si desea reemplazarlo, por favor póngase en contacto con servicio al cliente en el 1-800-519-2419.

Para asegurarse de que el guardián alerta 911 funcionará cuando usted lo necesita, vuelva a colocar la batería cada seis meses.

Nota: La tapa de la batería se instala correctamente sólo en una dirección.

El colgante de la carga:

Coloque el portátil en la unidad BASE, empujando hacia abajo hasta que descansa firmemente sobre los contactos de carga. Asegúrese de que la carga LED enciende rojo, indicando que la carga. El cargo LED será verde cuando está completamente cargada.

Ubicación de la base:


Para obtener los mejores resultados y el alcance óptimo, coloque la BASE en un lugar remoto de los aparatos que pueden causar interferencia eléctrica. Estos dispositivos incluyen el horno de microondas, conjuntos de tambores o mezcladores eléctricos, secador de pelo y otros teléfonos inalámbricos.

Si utilizas más de un guardián alerta 911 en la casa, se recomienda que las BASES son por lo menos 3 m (10 pies) de distancia.


Carga LED



Sistema para usar como colgante:

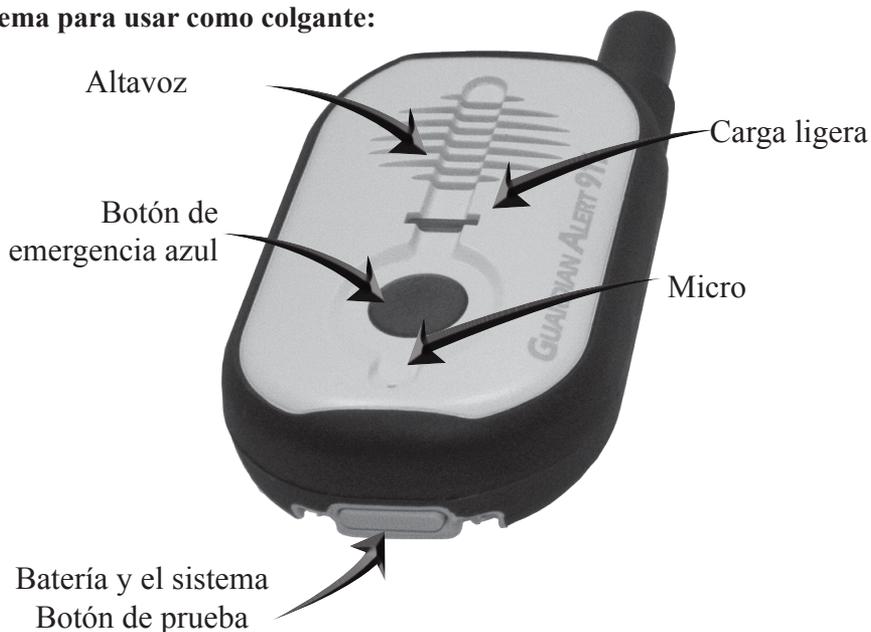

Características de la unidad base:

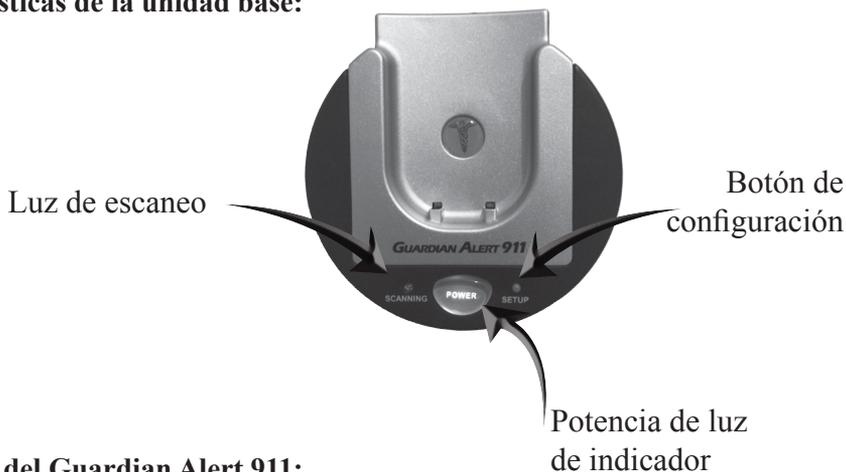


Conexión del Guardian Alert 911:

Conexión estándar:

No se necesita de una línea telefónica especial ni de un servicio telefónico especial para utilizar su Guardian Alert 911. Su teléfono trabajará con su teléfono hogareño por tonos o línea telefónica y servicio ya existente. Trabaja de la misma manera que cualquier teléfono inalámbrico.


Simplemente enchufe el ADAPTADOR de CA y el CABLE TELEFÓNICO de la manera indicada.

Precaución: No enchufe el ADAPTADOR de CA en un tomacorrientes que esté controlado por un interruptor. Se podría accionar inadvertidamente el interruptor desconectando el tomacorriente, lo que apagaría la UNIDAD BASE.

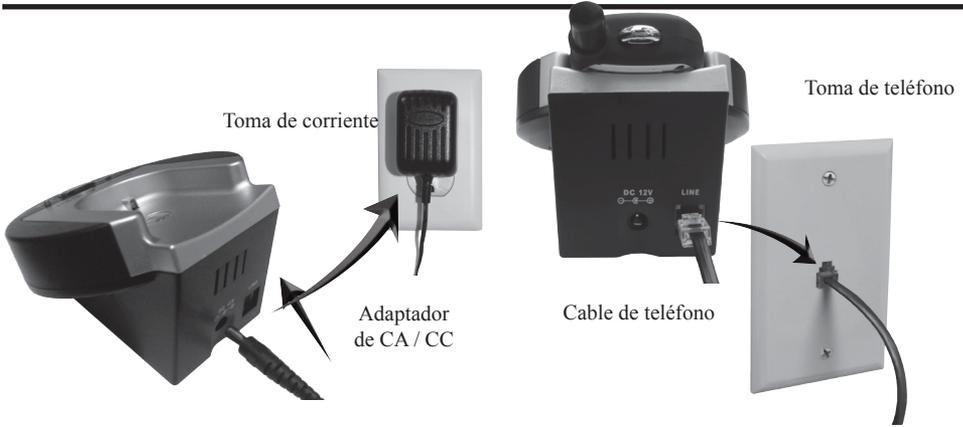

Conexión a un segundo teléfono:

Es posible que necesite enchufar un teléfono convencional en la misma conexión que utiliza el Guardian Alert 911. Esto se hace fácilmente utilizando un bifurcador de línea telefónica (incluido). Observe la ilustración que aparece a la derecha.

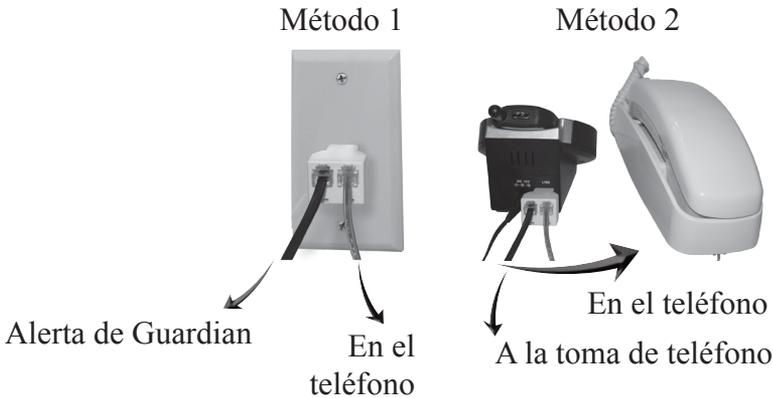

Nota especial en caso que su sistema telefónico sea VoIP:

El protocolo Voice-over-Internet (VoIP – Voz por Internet) es un servicio telefónico que envía su llamada por Internet en lugar de hacerlo a través del sistema telefónico normal. El Guardian Alert 911 funciona correctamente con la mayoría de los sistemas de voz sobre IP.

Es importante (en caso que todavía no lo haya hecho) que registre su dirección física con su proveedor de VoIP, y controle que el servicio 911 esté disponible para usted.

En caso de no estar seguro si su teléfono utiliza VoIP, o para determinar si su sistema VoIP es capaz de discar el 911, consulte a su proveedor de servicio telefónico.

Para instalar el Guardian Alert 911, simplemente enchufe el producto en un zócalo telefónico (o zócalo adaptador) en el que habitualmente enchufa la línea telefónica normal, y ya estará todo listo. Recuerde que si tiene en funcionamiento tanto una línea tradicional COMO un sistema telefónico VoIP, le recomendamos conectar el sistema Guardian Alert 911 a la línea tradicional.

En caso que su hogar cuente con sistema DSL:

En caso que su hogar cuente con servicio DSL para su computadora, deberá usar un filtro DSL en línea con el Guardian Alert 911 O NO FUNCIONARA. Podrá obtener este filtro en comercios de productos electrónicos o de su proveedor de servicio DSL. Observe la ilustración que aparece a la derecha.



Operación del Guardian Alert 911

Sobre el colgante:

El COLGANTE es un pequeño teléfono manos libres. Lo puede utilizar alrededor del cuello, colgado cinturón utilizando el gancho provisto, o ser llevado en el bolsillo.

Hay un gran botón azul en el frente del COLGANTE, el que al ser pulsado por más de medio segundo, activa el sistema y disca automáticamente el número de emergencia 911.

Una vez que se establezca la conexión, usted podrá hablar directamente con el operador del 911 y explicarle la naturaleza de su emergencia.

Conexión de la cordón para el cuello:

En caso que utilice la cordón alrededor del cuello, abróchelo de la manera en que se muestra a la derecha.



Resistencia al agua (no es resistente al agua):

Tenga en cuenta que, aunque la pendiente es resistente al agua, no es impermeable. Exposición regular a la agua, jabones, champús y acondicionadores puede dañar los sellos del agua con el tiempo, pero también afectar el rendimiento del altavoz - reducción del volumen. Para prolongar la vida de su colgante, recomendamos llevar el colgante justo fuera de la ducha o el baño, pero llegar a un accidente ocurrido en la ducha o bañera.

Probar la batería

El Guardian Alert 911 cuenta con su propio probador de carga de la pila. Cuando se oprime el botón del COLGANTE, un anuncio de voz grabado le informará el estado de carga de la pila. Se escuchará uno de los siguientes mensajes:

“Battery is OK” (Pila está bien).

Compruebe el estado de la batería dos veces al mes.

“Recharge battery soon” (Recargue la batería antes).

Carga colgante en la unidad BASE

“Recharge battery now” (Batería de la recarga ahora)

Carga colgante en la unidad BASE

Tenga en cuenta lo siguiente: En caso que no haya respuesta luego de oprimir el botón durante uno o más segundos, la pila está agotada y deberá ser reemplazada inmediatamente.



Bouton TEST

Se deberá probar el estado de la pila dos veces al mes, conjuntamente con el Control del sistema descrito en la siguiente página. En caso que se controle el estado de carga de la pila todos los días, su carga se agotará mucho más rápidamente y no durará el tiempo normal.

Control del sistema

El botón en la parte inferior del aparato que se utiliza para hacer el CONTROL DE BATERÍA también efectúa el CONTROL DEL SISTEMA. Oprima este botón por más de cuatro (4) segundos. Se escuchará uno de los siguientes mensajes.

“System check, ALL FUNCTIONS ARE OK” (El sistema está OK).

Esto confirma lo siguiente:

- Estado de la batería.
- Los trabajos de colgante.
- La unidad básica de trabajo.
- La unidad BASE se conecta a una línea de teléfono de trabajo.
- El colgante es en gama de la unidad BASE.

“BASE and PENDANT out of range.” (“Básico y colgante fuera del alcance”).)

- Esto confirma uno o más de los siguientes:
- El colgante es defectuoso.
- La unidad BASE es defectuosa.
- El colgante y la unidad BASE no se comunican entre
- sí o están fuera de alcance.
- No puede detectar la línea de teléfono/tono. »
- La unidad BASE no está conectada a la línea telefónica o no puede conseguir el tono de una razón más.



Bouton TEST

“Cannot detect telephone line/dialtone.” (“No puede detectar la línea de teléfono/tono.”)

- La unidad BASE no está conectada a la línea telefónica o no puede conseguir el tono de una razón más.

Esta función es muy útil - le permite confirmar que el sistema funcione en todas las partes de su hogar. Simplemente camine por los diferentes ambientes de su hogar y presione el botón Battery Check / System Check (Control de pila / Control de sistema) hasta que escuche el tono de discar y la grabación “SYSTEM CHECK ALL FUNCTIONS ARE OK”.

Recomendamos enfáticamente realizar esta prueba cada 2 a 4 semanas para confirmar que su sistema esté operando correctamente, y que el colgante y la estación base tengan buena comunicación, además que la estación base cuente con tono de discar. También es muy recomendable realizar esta prueba de sistema luego de tormentas eléctricas que podrían dañar la estación base cuando está conectada a la línea telefónica.

Marcador de emergencia utilizando el botón de pánico

En caso de emergencia, oprima el botón azul de pánico ubicado en la parte delantera del COLGANTE. Cuando se oprime este botón por 1 segundo, el Guardian Alert 911 discará automáticamente el 911. Cuando conteste la operadora del servicio de emergencias, hable con un volumen de voz normal y lo escucharán sin problemas. No es necesario mantener el COLGANTE frente a su boca. Lo escucharán claramente, incluso si el COLGANTE está a un brazo de distancia.



Botón de emergencia azu

Cuelga:

Usted puede colgar en cualquier momento pulsando el botón de prueba en la parte inferior de la caja del colgante. Si el 911 operador cuelga el teléfono y no se cuelga con este botón, el sistema todavía apaga automáticamente después de 3 minutos de silence.sur la línea telefónica.

Botón de prueba



GUÍA PARA SOLUCIÓN DE INCONVENIENTES

¿Qué pasa que no puedo hacer funcionar el Guardian Alert 911?

Paso 1 – Controle el COLGANTE.

Deberá hacer lo siguiente:

Oprima el botón BATTERY CHECK/SYSTEM CHECK ubicado en la parte inferior del COLGANTE.

Deberá suceder lo siguiente:

Deberá escuchar el anuncio grabado del estado de carga de la pila.

Se deberá encender el indicador en la parte delantera del COLGANTE.

En caso que no suceda nada, la causa más probable es que la pila esté agotada o que se la haya instalado al revés.

En caso que el COLGANTE aparentemente esté funcionando, siga al paso 2.

Paso 2 – Controle las conexiones de la UNIDAD BASE

Deberá hacer lo siguiente:

Asegúrese que el ADAPTADOR DE CA esté enchufado en un tomacorrientes activo y a la UNIDAD BASE.

Deberá suceder lo siguiente:

El indicador azul POWER deberá estar encendido siempre que la UNIDAD BASE esté conectada a la corriente eléctrica.

En caso que el indicador POWER esté encendido y que la UNIDAD BASE esté conectada a una línea telefónica activa, siga a paso 3.

Paso 3 – Asegúrese que el COLGANTE y la UNIDAD BASE estén comunicándose entre sí.

Información adicional: El COLGANTE y la UNIDAD BASE están conectados por medio de un enlace radial inalámbrico. Deben estar sincronizadas para funcionar entre sí. Se las ha sincronizado en fábrica, pero es fácil hacerlo nuevamente.

Deberá hacer lo siguiente:

1. Oprima el botón “SET-UP” en la UNIDAD BASE hasta que se encienda el indicador rojo “SCANNING”. Suelte el botón SETUP.
2. Pulse y mantenga oprimidos al mismo tiempo los botones PANIC y TEST hasta que se apague el indicador “SCANNING” en la UNIDAD BASE.

Deberá suceder lo siguiente:

El indicador rojo se apagará en la UNIDAD BASE. Esto indicará que el COLGANTE y la UNIDAD BASE están sincronizados. En este momento, todo debería estar funcionando correctamente.

En caso que su Guardian Alert 911 siga sin funcionar, llame a nuestro departamento TECH SUPPORT (SOPORTE TÉCNICO) al teléfono 800-519-2419.

Información que la FCC (Comisión federal de comunicaciones, por sus siglas en inglés) desea que usted conozca:

Identificación de la FCC: TYD30911

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no deberá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan afectar su funcionamiento.

No se garantiza la privacidad de sus comunicaciones al utilizar este teléfono.

Advertencias y precauciones generales

Advertencia

- LogicMark, LLC NO garantiza que esta unidad sea completamente impermeable. Para reducir el riesgo de dañar la unidad, NO exponga durante mucho tiempo el colgante o la unidad base al agua, lluvia o humedad.
- El Guardian Alert 911 ha sido diseñado únicamente para uso residencial. Puede no funcionar correctamente en caso de ser conectado a sistemas telefónicos comerciales.
- El Guardian Alert 911 ha sido diseñado únicamente para funcionar con sistemas de marcador de tonos. No lo utilice si solamente cuenta con servicio de discado por pulsos.
- Este producto o sus accesorios puede contener plomo, una sustancia química que el Estado de California ha determinado que produce defectos congénitos u otros riesgos reproductivos.

Cláusula de exención de responsabilidad:

LogicMark, LLC., no será responsable por el uso inadecuado del Guardian Alert 911, tampoco será responsable por las fallas que cause el uso del equipo conectado a la misma línea telefónica. Tampoco seremos considerados responsables por la calidad de la línea telefónica o la fiabilidad o calidad del servicio telefónico con el que se utilice el Guardian Alert 911.

LogicMark, LLC. no será responsable de la instalación del 911 Guardian Phone. Tampoco será considerado responsable por el uso indebido o abuso de esta unidad.

Normas de seguridad importantes:

Cuando utilice su Guardian Alert 911, tenga en cuenta las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones personales, choques eléctricos o incendio.

1. Guarde estas instrucciones como referencia en el futuro.
2. Lea atentamente todas las instrucciones y asegúrese de haberlas entendido claramente.
3. Desenchufe este producto de la red eléctrica antes de intentar limpiarlo. No utilice ningún líquido de limpieza para limpiar la Unidad Base o el Colgante. Utilice

- solamente un paño suave humedecido.
4. No coloque la Unidad base cerca de ninguna fuente de agua, tal como dentro de un baño, cerca de la pileta de la cocina o lugares semejantes.
 5. No abra la unidad (excepto el alojamiento de las pilas de la manera indicada en estas instrucciones) del Colgante por ninguna razón. Todo intento de apertura de la Unidad base o del Colgante inhabilitará la garantía y pueden dañar la unidad o impedir que funcione correctamente.
 6. No utilice ninguna fuente de corriente excepto la provista por LogicMark, LLC específicamente para este producto. El empleo de cualquier otra fuente de alimentación podría dañar la unidad o hacer que su uso sea inseguro.
 7. En caso que la unidad deje de funcionar, no trate de repararla. Por favor, envíela a LogicMark, LLC para su reparación o sustitución de acuerdo con lo estipulado en “GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO”.

Garantía Limitada y Exención de Responsabilidad de LogicMark

ALCANCE DE FUNCIONAMIENTO:

El alcance operativo de su Guardian Alert 911 depende de muchos factores, incluyendo paredes intermedias, interferencia eléctrica o el ruido eléctrico producido por diferentes aparatos electrodomésticos tales como aspiradoras, hornos de microondas, multiprocesadoras, molinillos de café, secadores de cabello u otras fuentes en la casa. El alcance del sistema deberá cubrir la superficie de una casa normal y los patios delanteros, traseros y laterales. Efectúe el Control de sistema que aparece en la página 10 para confirmar el alcance de su sistema.

LIMITACIONES DE NOTIFICACIONES Y RESPUESTAS: El Comprador entiende y admite que las señales transmitidas por líneas telefónicas o por otros modos de comunicación pasan por redes que están más allá del control de LogicMark LLC y que no reciben mantenimiento por parte de LogicMark LLC, y por lo tanto, LogicMark LLC no puede hacerse responsable de ninguna falla de equipos o comunicaciones que impidan la transmisión de señales en solicitud de ayuda a los operadores de emergencias policiales del 911 o los perjuicios consecuentes. El Comprador entiende y admite que LogicMark LLC no contesta las llamadas hechas por su equipo Guardian Alert 911. El equipo está diseñado para comunicarse con los operadores de emergencias policiales del 911 y LogicMark LLC no puede ser considerado responsable del tiempo de respuesta o de las respuestas que sean brindadas por el centro de atención telefónica a emergencias policiales del 911.

EL COMPRADOR ES RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA INDISPENSABLES: El Comprador reconoce y admite que el equipo Guardian Alert 911 (incluyendo la Batería de respaldo opcional) debe estar conectado en un conector telefónico estándar y que se comunica utilizando una comunicación de voz de dos vías por medio de una línea telefónica estándar. En caso de utilizar transmisión VOIP por medio de Internet, se deberá utilizar un adaptador especial (no incluido) para que el equipo pueda funcionar. El servicio VOIP por Internet no funcionará cuando esté interrumpido el servicio eléctrico, excepto tanto su computadora como su sistema Guardian Alert 911 estén equipados con una batería de respaldo. El Comprador reconoce y admite que el equipo Guardian Alert 911 (y su Batería de respaldo opcional) requiere

de una alimentación de CA de 110 Voltios por medio de un tomacorriente eléctrico y de una conexión telefónica de tipo RJ11 o equivalente, y que la provisión y mantenimiento de tales servicios son responsabilidad del Comprador.

COMPROBACIÓN Y MANTENIMIENTO del equipo Guardian Alert 911: El equipo Guardian Alert 911 (y su Batería de respaldo opcional), una vez instalados, se encuentran bajo la posesión y control exclusivo del Comprador, y es responsabilidad exclusiva del mismo la comprobación del funcionamiento del equipo y la solicitud de servicio técnico en caso que el equipo se encuentre bajo garantía.

GARANTÍAS LIMITADAS O DECLARACIONES. LogicMark LLC no declara ni garantiza que el sistema Guardian Alert 911 evitará daños, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad, o que el sistema de protección personal de emisión de alertas brindará en todos los casos la protección deseada por cuya razón haya sido instalado o adquirido. El comprador reconoce y admite que LogicMark LLC no es una compañía de seguros, y que el Comprador asume todos los riesgos por daños y perjuicios que puedan sufrir tanto la persona misma o la propiedad del Comprador. LogicMark LLC no emite declaraciones o garantías, excepto aquellas expresadas en la presente, sobre la comerciabilidad o adecuación para uso en particular alguno.

ÚNICO RECURSO PARA EL COMPRADOR: El único recurso del comprador, en caso de incumplimiento de LogicMark LLC en relación con la presente, es la de solicitarle a LogicMark LLC la reparación o reemplazo, a elección de LogicMark LLC, de cualquier equipo o pieza del sistema de alerta personal de emergencia que no funcione durante el período de garantía otorgado por LogicMark LLC.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: El equipo Guardian Alert 911 no está diseñado o garantizado para evitar daños o lesiones. Esta Garantía Limitada y Exención de Responsabilidad constituye los términos de venta y uso del Guardian Alert 911 (y de sus equipos accesorios), y en caso que a pesar de estos términos de venta y uso del producto surja una sentencia de responsabilidad en contra de LogicMark LLC como resultado de cualquier tipo de causa, sin importar que tal daño, perjuicio o lesión personal haya sido causada directamente o como resultado de la contribución de la negligencia de LogicMark LLC en cualquier grado o debido a un incumplimiento de cualquier obligación o por responsabilidad directa de los productos, tal responsabilidad quedará limitada al monto abonado por el Comprador a LogicMark LLC por el producto, o hasta la suma de \$150.00, la que resultare más alta.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

LogicMark, LLC garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en sus materiales y fabricación bajo condiciones normales de uso por **un (1) año** a partir de la fecha de compra original para su uso. Cuando el comprador original devuelve el producto ya abonado a LogicMark, LLC; 10106 Bluegrass Parkway, Louis, KY 40299, EE.UU., dentro del período de garantía y se encuentra que el producto presenta defectos, LogicMark, LLC lo reparará o sustituirá a su elección.

Esta garantía constituye la única responsabilidad de LogicMark, LLC para con este producto. LogicMark, LLC expresamente rechaza toda otra responsabilidad, **INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO USO, ENTRE OTRAS. NINGUNA PERSONA, EMPRESA O CORPORACIÓN ESTÁ AUTORIZADA POR LogicMark, LLC. PARA ACEPTAR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD POR LA VENTA Y USO DE ESTE PRODUCTO.** LogicMark, LLC y sus agentes y distribuidores no tendrán ninguna otra responsabilidad por daños incidentales o consecuentes ni gastos de ningún tipo.

Algunos estados no admiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación para daños incidentales o consecuentes no corresponda ser aplicada en su caso en particular.

Esta garantía queda invalidada en caso que el producto haya sufrido daños o se lo haya intentado manipular o se haya abierto cualquiera de las partes. En todos los casos en que el producto sufra daños durante su traslado hacia la fábrica en período de garantía, se deberá presentar el reclamo al transportista y no a LogicMark, LLC.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos; es posible que otros estados le otorguen otros derechos diferentes.



10106 Bluegrass Parkway;
Louisville, Kentucky 40299

Tel: 800-519-2419

Toll Free: 1-800-519-2419

Fax: 703-934-7935

www.LogicMark.com

©2017 LogicMark, LLC

Part # 5011S